



СИЭС МЕДИКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая звуковая
зубная щетка
CS Medica CS-561 Kids



Благодарим Вас
за приобретение
зубной щетки
CS-561 Kids



Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией России



Внимательно ознакомьтесь
с инструкцией до начала
эксплуатации данного устройства.
Сохраните это руководство
для получения необходимых
сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем
руководстве по эксплуатации.
При покупке требуйте правильного его
заполнения: предоставления печати продавца
и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для
гигиены полости рта для детей от 1 до 5 лет.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение:
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, развитие которой
может привести к серьезной травме.

- Зубная щетка не является игрушкой и
содержит мелкие детали, которые могут
быть проглочены ребенком. Храните ее в
недоступном для детей месте.
- Вне зависимости от степени участия взрослых
в процессе чистки зубов ребенка,
данная процедура должна всегда
проводиться под контролем взрослых.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом
перед использованием устройства, если к
Вам относится что-либо из нижеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная пародонтальная
или стоматологическая хирургическая
операция;
 - прохождение курса лечения, связанного
с проблемами в ротовой полости.


- Прекратите использовать устройство и
проконсультируйтесь со своим стоматологом,
если у Вас наблюдается сильная
кровоточивость десен после недели пользования
данной зубной щеткой.
- Считается, что абразивные вещества,
содержащиеся в зубной пасте для удаления
пятен от табака или отбеливания
зубов, могут серьезно повредить эмаль в
случае их продолжительного использования.
Проконсультируйтесь со своим стоматологом
перед тем, как начать использование
зубных паст с повышенным содержанием
абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать
устройство самостоятельно.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур
и прямых солнечных лучей.

Внимание:
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, развитие которой может
привести к незначительной травме,
травме средней тяжести или порче
имущества.

- Данное устройство предназначено только
для ухода за полостью рта человека в
домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной
гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам
слишком сильно и не касайтесь их никакими
другими пластиковыми деталями щетки,
кроме щетины. Не чистите одну область в
течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не
указанные для данного устройства. Вставляйте
элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлеките элемент питания из зубной
щетки, если Вы не собираетесь пользоваться
ею в течение длительного времени
(от трех и более месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно.
Не роняйте ее и не подвергайте сильному
ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца,
а не ногтем, чтобы не повредить поверхность
кнопки.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зубная щетка CS-561 Kids рекомендуется
для чистки зубов детей в возрасте 1–5 лет.

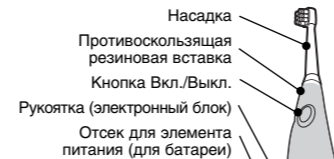


**Дополнительно можно
приобрести:** насадки
CS Medica SP-51 для электрической
звуковой зубной щетки CS-561 Kids (в
комплекте 2 насадки).

3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Поверните крышку отсека для элемента
питания против часовой стрелки и
снимите ее.



2. Установите алкалиновую (щелочную)
батарею типа AAA таким образом, чтобы
положительный (+) и отрицательный (-)
контакты совпали с полярностью,
указанной в отсеке для элемента питания.

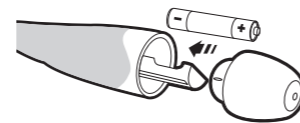

Примечание:

Перед тем как вставлять батарею, насухо
вытрите руки и корпус зубной щетки.

3. Закройте крышку, повернув ее по часовой
стрелке. Поворачивайте крышку до тех
пор, пока знаки «точка» и «тире» не совпадут
на обратной стороне рукоятки.




Примечание:

Если отсек для элемента питания закрыт
неплотно, в корпус устройства может
попасть вода и вызвать нарушения в работе
зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от
его модели, времени использования, силы,
прилагаемой во время чистки, и иных
факторов. Замените батарею, когда движения
щетки станут более слабыми.
- Время работы от одной алкалиновой
(щелочной) батареи составляет около 150
дней при условии, что щетка используется
2 раза в день по 2 минуты. Так как
прилагаемая батарея рассчитана для
демонстрационных целей, она может
проработать менее 150 дней.
- Рекомендуем использовать алкалиновые
(щелочные) элементы питания типа AAA.

4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку
на рукоятку, совместив
направляющие на насадке и рукоятке,
и поверните ее по часовой стрелке до упора,
как показано на рисунке ниже.
Для того чтобы снять насадку,
необходимо проделать те же действия
в обратном порядке.

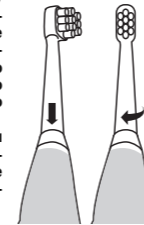

Примечание:
Не прилагайте излишних усилий при
установке насадки.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на нее
немного зубной пасты. После этого
введите щетку в ротовую полость.

Примечание:
Чтобы предотвратить разбрызгивание
зубной пасты, включайте и выключайте
зубную щетку только при ее нахождении во рту.

2. Включите питание, нажав на кнопку
Вкл./Выкл.
После однократного нажатия на кнопку
включается подсветка насадки. После
следующего нажатия головка щетки
начинает вибрировать, при этом
подсветка остается включенной.

Подсветка насадки помогает Вам
следить за ходом чистки зубов
Вашего ребенка и сделать эту
процедуру увлекательной.


Дополнительные функции:

Автоматическое отключение через 2 минуты
Щетка отключается через 2 минуты.
При необходимости Вы можете
продолжить чистку, снова включив
питание щетки.


Промежуточный таймер каждые 30 секунд
Щетка делает на мгновение паузу
каждые 30 секунд, что ориентирует
Вас на равномерную очистку всех
участков полости рта.

Аккуратно касайтесь зубов и десен
щетинками, медленно перемещая
головку щетки по зубам в
горизонтальном направлении,
последовательно проводя чистку
всей поверхности зубов.

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

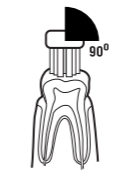

**Поверхность зуба
и окклюзионная
поверхность:**
Во время чистки
держите щетину
под углом 90°
к поверхности зуба.

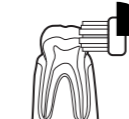

**Граница между
зубами и десной:**
Во время чистки
держите щетину
под углом 45°
к поверхности зуба.



**Задняя сторона
резцов или область
неровно расположенных
зубов:**
Вертикально
прижимайте головку
щетки к зубу
и очищайте их
по очереди, учитывая
угол расположения зубов.

3. Завершив чистку зубов, не вынимая
щетку изо рта, нажмите на кнопку
Вкл./Выкл., чтобы выключить
зубную щетку.

4. Промойте головку щетки под
проточной водой. Аккуратно
стряхните излишек воды.

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.
Удаляйте загрязнения с корпуса
щетки мягкой сухой тканью. При
необходимости смачивайте ткань
в воде или мягком моющем
средстве. Загрязненную
поверхность также можно
смочить водой, а затем протереть
тканью.
- Несмотря на то, что щетка является
водонепроницаемой, не погружайте
ее в воду на длительное время.
- Не используйте для очистки
летучие органические соединения,
такие как бензин и растворитель.
Это может испортить нанесенную
краску или привести к повреждению
устройства.
- После каждого использования
промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой
аккуратно. Не роняйте ее и не
подвергайте сильному ударному
воздействию.
- Храните щетку в недоступном для
детей месте.
- Храните щетку вдали от огня,
высоких температур и прямых
солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не
реже одного раза в три месяца.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-561 Kids
Модель	
Потребляемая мощность	0,18 Вт
Источник питания	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AAA
Время работы от одного элемента питания	Около 150 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 мин)
Частота колебаний	16 000 движ./мин.
Рабочая температура / относительная влажность	0–50°C / 30–85%
Температура / относительная влажность / атмосферное давление при хранении и транспортировании	-20–60°C / 10–95% / 700 гПа–1060 гПа
Масса	25 г (без элемента питания)
Габаритные размеры	134,5 (в) x 28 (ш) x 25 (г) мм
Срок службы	Рукоятка (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца, Элементы питания – устанавливается производителем этих элементов.

Комплект поставки
Рукоятка (электронный
блок) с насадкой, дополнительная
насадка, алкалиновый элемент
питания типа AAA, руководство по
эксплуатации с гарантийным
талоном

IPX7 Степень защиты корпуса зубной
щетки от проникновения твердых
предметов и воды.

EAC Знак обращения продукции на рынке
Таможенного союза

Температурный диапазон
/ Диапазон влажности
/ Ограничение атмосферного давления

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОКАЗАНЫ
КЛИНИЧЕСКИ***
* Кисельникова Л.П., Зуева Т.Е.,
Карасева Р.В., Огарева А.А.
Сравнительная эффективность
использования различных
зубных щеток в детском
возрасте // Стоматология
детского возраста и
профилактика. 2017. Т. XVI.
№1 (60). С. 51–57

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в
серийном номере, который находится
в батарейном отсеке щетки и имеет
структуру YUMNNNNN, где YU
обозначает последние две
цифры года производства, M –
номер месяца производства (1–9
соответствуют месяцам с
января по сентябрь, X –
октябрь, Y – ноябрь, Z –
декабрь), NNNNN –
порядковый номер изделия.

9. МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала
работать, возможно, батарейка
разрядилась. В случае если
даже после замены батарейки
зубная щетка не работает,
не пытайтесь ремонтировать
ее самостоятельно. Обратитесь
в ближайший к Вам сервисный
центр (адреса сервисных
центров указаны в конце
данного руководства).

**Надежная утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)**

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сроки гарантии:
Рукоятка (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « ____ » _____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя _____

Дата обращения « ____ » _____ г.

Закончение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю « ____ » _____ г.

Подпись и штамп мастера _____

Работу принял _____
(подпись клиента)

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.014.E.001555.08.16 от 19.08.2016 г.
Срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № TC N RU Д-СН.МГ11.В.04978 от 31.08.2016 г.
Срок действия до 30.08.2021 г.
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Сертификат соответствия № TC RU С-СН.ГА05.А.01974 от 14.07.2016 г.
Срок действия не ограничен.
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЭс Медика»

Импортером и уполномоченным представителем производителя на территории Российской Федерации, а также государств-членов Таможенного Союза является фирма ООО «СиЭс Медика»

127006, Москва, Воронниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел.: (495) 363–16–52
Тел./факс: (495) 363–16–56

Центр технического обслуживания в Москве:

ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
127006, Москва, Воронниковский пер., д. 7, стр. 3
(м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995-11-32
(многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru
(сервисный центр)

www.csmedica.ru

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China. (№ 239 Цзяньху Родд, Зоун С Гонтанг Индастриал Парк, Цзяньбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)
Сделано в Китае

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ CS MEDICA В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_mediscam@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиперейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (472) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», с. Падун, ул. 25-летия Братскгэзстроя, д. 21, пом. 43 тел.: (3953) 36-29-28, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@vologda.ru
- Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76 voronezh@csmedica.vrn.ru
- Воронеж, ООО «СиЭс Медика Техэксперт Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 232-03-58 voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-54-55, 377-66-4, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Йошкар-Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@marf-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, keмерово@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omron@kubannet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicainisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgnl@csmedica-ural.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Дзержинского, д. 176, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Муранск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), проспект Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murtansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01, cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru

- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Леднева, д. 5, тел.: (8617) 75-15-00, +7-938-525-15-00, cs_medicianov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, direktor55@csmedica.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орёл», ул. Московская, д. 80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, csodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерещкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, строение 1, офис 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@sama.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnpi@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетское сельский просп., д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», просп. Победы, д. 54, пом. 37, тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasonchi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, помещ. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tvr@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», бульвар Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-itt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 104, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (911) 885-07-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70, (932) 321-46-21, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой, д. 6, оф. 43, тел.: (3012) 23-01-61, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63 csmedicaherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шакты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Июнова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru