

Скиппи (Skippi / Skippi^{plus})

Кресло-коляска с электроприводом для детей

На фото кресло-коляска в комплектации с регулируемыми по высоте съемными загнутыми ручками для сопровождающего лица, держателем пульта с функцией параллельного отведения, подножкой для короткой голени, флажком и ручным звуковым сигналом, вкладками для уменьшения ширины сиденья, электрорегулировкой угла наклона сиденья



Краш-тест

в соответствии с
ISO 7176-19

в соответствии с
ANSI/RESNA

Использование кресла-коляски с электроприводом Скиппи поддерживает мотивацию ребенка к самостоятельному перемещению и интерес к познанию окружающего мира.

Скиппи выводит активность ребенка на качественно иной уровень — стимулирует развитие ребенка в когнитивной и эмоциональной сферах.

Ключевые особенности

- Компактная, быстрая и маневренная.
- Дети мобильны, независимы и могут исследовать каждый уголок даже в небольших помещениях.
- Глубину и ширину сиденья, также как и положение ног, можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка.
- Можно перевозить в багажнике небольшой легковой машины (в разобранном виде).



Кресло Сквигглз на Скиппи



Кресло Майгоу на Скиппи^{плюс}



Скиппи^{плюс} с электрорегулировками угла наклона и высоты кресла

Стандартная комплектация

- Стандартное сиденье с кармашком на спинке.
- Подушка на сиденье.
- Регулируемые по высоте подлокотники.
- Регулировка угла наклона спинки $0^\circ / 10^\circ / 20^\circ / 30^\circ$.
- Пневматические шины.
- Передние колеса 8 дюймов.
- Задние колеса 12 дюймов.
- Регулируемые по высоте подножки.
- 31 Ah (C20) гелевые аккумуляторы.
- Зарядное устройство для аккумуляторов.
- Пульт управления.
- Брызговики.

Дополнительные опции

- Ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте.
- Пульт для сопровождающего лица.
- Параллельно отводящийся держатель пульта.
- Столик откидной.
- Ремень для фиксации таза.
- Боковые поддержки.
- Подголовник.
- Бампер.
- Объединенная подножка с алюминиевыми опорами для ног.
- Подножки с механической регулировкой угла наклона.
- Освещение.
- Звуковой сигнал (ручной).
- Электрорегулировка угла наклона спинки.
- Механическая / электрорегулировка угла наклона сиденья.
- Электрорегулировка высоты сиденья (лифт), 20 см.
- Комбинируется с различными вариантами сидений.
- Набор крепежей для перевозки в транспортном средстве ребенка, сидящего в кресле-коляске.



• Модульная конструкция



• Регулируемые по высоте боковины



• Набор крепежей для перевозки в транспортном средстве



- Ручки для сопровождающего лица с регулировкой высоты, быстросъемные



- Пульт для сопровождающего лица



- Электрорегулировка угла наклона спинки




- Электрорегулировка угла наклона сиденья



- Бампер, съемный (только для длины подножки до 32 см)



- Освещение

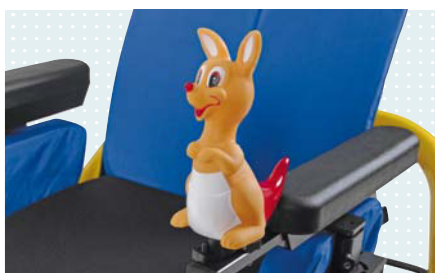

- Звуковой сигнал (ручной)

Технические характеристики	
Максимальный вес пользователя	50 кг
Ширина сиденья	30 см; 32 см; 34 см; 36 см; 38 см
Глубина сиденья	30 – 38 см
Высота сиденья (без подушки)	43 см
Радиус поворота	55 см
Общая ширина	57 см
Длина, включая подножки	85 см
Высота спинки	35 – 46 см
Длина подножки	15 – 38 см
Высота подлокотников	16,5 – 23,5 см

Угол наклона спинки	от -9° до +30°
Наклон сиденья	20°, механическая или электрорегулировка
Отклонение сиденья	0° / 3° / 6°
Электрорегулировка высоты кресла	20 см
Скорость	6 км/ч
Пробег	30 км
Максимальное время зарядки	12 ч
Высота преодолеваемых препятствий	5 см
Заезд по наклонной плоскости	12 %
Вес	68 кг